



夢人は義肢装具で培った技術力と最先端技術を組み合わせた頭蓋形状誘導ヘルメットです。ドクターの指示監修のもとヘルメットの設計から作製、装着後の調整まで、義肢装具会社である補装工具房スタンス株式会社が一貫して行います。

## 豊富な経験力

弊社は先駆的に頭蓋形状誘導療法を行ってきた国立成育医療センターで研修を積み、2015年より高槻病院、2018年より兵庫県立こども病院でヘルメットの適合調整業務に携わってきました。2021年までに約700症例を経験しております。

2020年コロナ禍の影響もあり日本製のヘルメットの要望が高くなつたため、ヘルメットの作製を開始いたしました。

## ヘルメット療法

補装工具房スタンスが作製する夢人は国家資格を持った義肢装具士が、赤ちゃんの頭部の変形を考慮し、医師の指示のもとヘルメットの設計・作製を行っております。

ヘルメット療法が開始される患児の月齢は3ヶ月から7ヶ月です。ヘルメットの装着期間はおよそ6ヶ月とされ、その間頭囲は2~4cm大きくなり赤ちゃんの頭の形はヘルメット装着後大きく変化いたします。

ヘルメットの治療効果を最大限に引き出すためには定期的な診察と頭の変形の変化に応じてヘルメットを調整することが大切です。装着後の調整に関しても弊社の義肢装具士が病院内で行いますので、診察時に調整が完結いたします。

ヘルメットはほぼ一日中装着する必要があるため、汗や皮膚のトラブルに関しては親御様が一番心配されることと思います。2023年8月より吸汗に優れたインナーをヘルメットに装着しインナーの取り換えができるようにいたしました。インナーの素材は吸水性と撥水加工を施した生地を採用しており、汗をかいてもサラサラで快適な機能を付与する素材になっております。インナーは洗濯機による丸洗いが可能ですのでヘルメット内を常に清潔に保つことが可能となります。匂いなどが気になる場合はヘルメット自体も水洗いができます。

頭部の変形は後頭部の平坦化だけではなく頭頂部が縦に突出する変形もよく見られます。突出した頭頂部をヘルメットで上から押さえられるよう、頭頂部の穴の位置や大きさをカスタマイズすることができます。

## 選べるデザイン

ヘルメットはプラスチックの柄だけでなくベルトの色の選択も可能です。

STANCE

補装工具房スタンス株式会社



ヘルメットの設計から作製・装着後の調整まで義肢装具士が一貫して行います。  
月齢・症例に合わせたヘルメット仕様のカスタマイズが可能です。




インナーカバーあり



## AQINER アクアイナー

夢人(ゆめっと)に使用されているヘルメット専用インナーカバーは  
撥水性に優れた特殊な素材を使用しています。(AQUAHOLE)

### 薄層アクアホールテクノロジーとは？

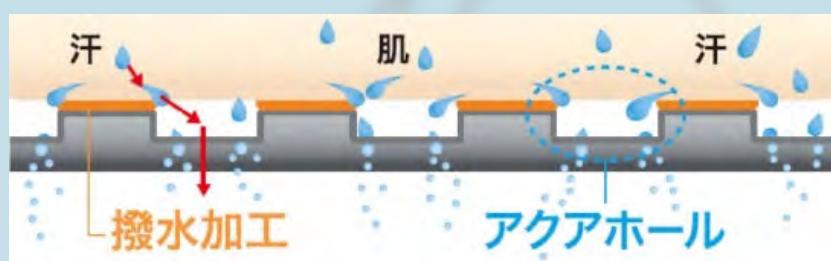

ベースの生地に吸水性を付与し、凸部先端のみに撥水加工を施します。汗を凹部より吸収し、肌に触れる凸部は撥水されているため、汗をかいてもサラサラ快適な機能を付与する技術です。

STANCE

補装工具房スタンス株式会社



補装具工房スタンス社製  
(日本製)

※症状に応じて仕様変更  
することができます



ホワイト



まめゴマちゃん



スター



フクロウ



Zoo



お花畠

NEW



バンビ



フラワー

NEW



花柄



ホース



リラックマ

NEW



ドッグ&キャット



すみっコぐらし



ジーンズ



水玉ピンク



水玉ブルー